

Használati utasítás

Fairywill 5020E szájzuhany

Köszönjük, hogy a Fairywill szájuhanyt választotta.

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Fontos információk

A leírásban található információk a készülék helyes és biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást szolgálja, a saját és mások sérülésének, valamint az anyagi károk okozásának elkerülése céljából.

A készüléket 8 életévüket be nem töltött gyermekek, mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékkal élő személyek kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használhatják! Gyermekektől elzárva tartandó.

A készüléken ne hajtson végre átalakítást, javítást.

Tartsa a töltőt víztől távol. Ne helyezze vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelébe vagy fölé. Ne merítse a töltőt vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás után, hálózatra való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a töltő teljesen megszáradt-e.

Ne használja a terméket fürdés közben.

Figyelmeztetés

A készüléket 8 életévüket be nem töltött gyermekek, mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékkal élő személyek kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használhatják!

A készüléket gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják. Játékra nem használható.

A hálózati kábel nem cserélhető. Sérülése esetén a töltő nem használható. A kockázatok elkerülése érdekében a töltőt mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.

Ne használja tovább, ha a készülék bármilyen módon károsodott.

A készülék csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.

A készülékben lévő akkumulátort a készülék hulladékgyűjtőbe helyezése előtt távolítsa el.

Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról.

Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban lásd: újrahasonosítás.

Ne töltse fel a tartályt 40 °C-nál melegebb vízzel.

Ne használja a töltőegységet szabadtéren vagy felmelegedett felületek közelében.

Ne használja a készüléket a mellékelt fűvóka nélkül.

Ne használja a száj tisztításán kívül más célra.


Tartsa távol a fűvókát kisgyermekektől, mivel lenyelhető darabokat tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.

Szájvíz használata nem javasolt, mert maró hatású, és befolyásolhatja a szájuhany élettartamát.

Amennyiben bármilyen fogászati kezelés alatt áll, vagy különösen érzékeny fogakkal és fogínnnyel rendelkezik a készülék használatának megkezdése előtt konzultáljon fogorvosával.

Ne nyomja túl erősen a fűvókát a fogaihoz vagy az ínyéhez, mert az sérülést okozhat.

Kialakítás

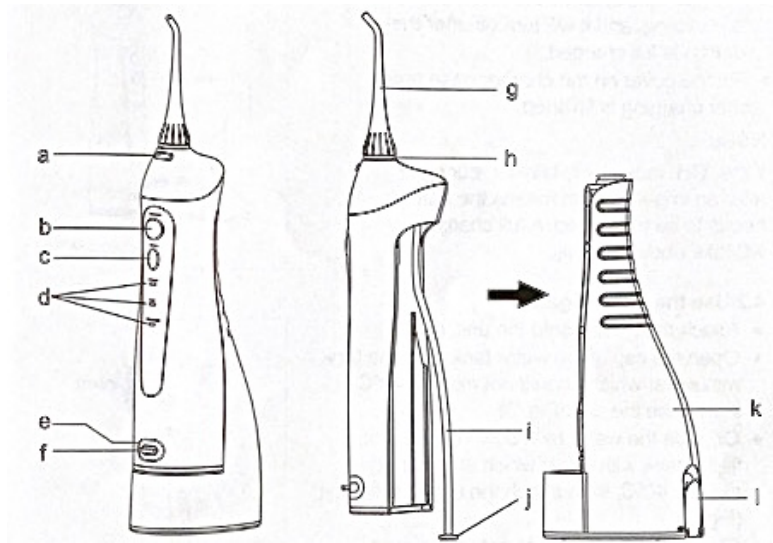

- a. Fúvóka kioldó gomb
- b. Be-/ kikapcsoló gomb
- c. Üzem mód kiválasztása gomb
- d. Üzem mód jelző
- e. Töltő csatlakozó
- f. Töltő csatlakozó biztonsági borítás
- g. Fúvóka
- h. Biztonsági gyűrű
- i. Vízszívó cső
- j. Szűrő
- k. Víz tartály (300ml)
- l. Víz tartály sapka

Előfordulhat, hogy a vízáramlási tesztek során használt desztillált víz felbontás után a fő készülékben még megtalálható (tartály, vízszívócső stb.). Ez minőségromlást és egészségügyi problémákat nem eredményez.

Használat

A készülék töltése

Csatlakoztassa a töltőegységet az elektromos hálózathoz és csatlakoztassa az eszközt a töltőegységhez. Vegye le a töltő fedelét, és helyezze be a készülék aljzatát. (Bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozó nem érintkezik vízzel és egyéb folyadékokkal.)

A készülék töltődése során a töltésjelző fény villog. Amikor a készülék teljesen feltöltődött a fény kialszik.

Ahhoz, hogy a tölthető akkumulátor megőrizze maximális kapacitását, a töltőegységet áramtalanítani kell, a markolatot pedig rendszeres használattal teljesen le kell meríteni legalább fél évente egyszer.

Az újratölthető akkumulátor lemerülését a készülék kikapcsolását követően a töltésjelző villogása jelzi. A teljes feltöltéshez 4 óra szükséges.

A szájhigiéné használata

Helyezze a fúvókát a markolatra.

Az első használat megkezdése előtt tölts fel a víz tartályt 40 °C-nál nem melegebb vízzel és zárja le azt.

Vagy, csúsztassa le a víz tartályt a készülékről, tölts fel a víz tartályt 40 °C-nál nem melegebb vízzel zárja le azt és csúsztassa vissza a víz tartályt a készülékre.

Az üzemmód gomb megnyomásával válassza ki az Önnek legoptimálisabb tisztítási üzemmódot.

A készülék használatakor három tisztítási mód közül választhat.

CLEAN üzemmód, erős víz sugár, hatékony tisztítás a mindennapokban.

SOFT üzemmód gyenge erősségű víz sugár, gyengéd ápolás az érzékeny fogakkal rendelkezőknek.

MASSAGE üzemmód, közepes erősségű vízsugár, az ínyre célozva javítja annak vérrellátását, ezáltal fokozva a védekezőképességét.

Hajoljon a mosdókagyló fölé és vezesse végig a szájuhány fűvókáit a fogain és a fogínyén. A műveletet enyhén nyitott szájjal végezze, hogy a víz a mosdókagylóba folyhasson.

A be-/ kikapcsológomb megnyomásával indítsa el a szájuhányt.

A vízsugarat irányítsa a fogára és fogínyére 90 °-os szögben, lassan irányítsa a vízsugarat a fogak mentén.

Írnyítsa a vízsugarat az íny vonala mentén úgy, hogy a fűvóka hegye 90 fokos szöget zár be az íny szövethöz képest.

Különösen figyeljen a fogsabályzók, koronák vagy hidak körüli alapos tisztításra.

Nyomja meg a be- kikapcsológombot és a fűvóka kioldó gombot, amennyiben a fűvóka cseréjére lenne szükség.

A tisztítás végeztével a be- kikapcsológomb megnyomásával kapcsolja ki az eszközt.

Használat után

Nyissa fel a víztartály sapkát és ürítse ki a tisztítás után maradt felesleges folyadékot.

A készüléket törölje át egy száraz kendővel.

A víztartályt mindig teljes egészében ürítse ki, mert így elkerülhető a baktériumok elszaporodása az állóvízben. Hosszabb idejű tárolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék minden eleme tiszta és száraz.

Karbantartás

A készüléket csak vízzel vagy semleges tisztítószerrel lehet tisztítani.

Soha ne használjon maró vagy súrolószert (ecetet vagy vízkőeltávolítót), mert ezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C feletti, forró vizet a mosáshoz. Tartsa távol a készüléket magas hőmérsékletű helyektől, és kerülje a közvetlen napfényt.

Szájuhány: Távolítsa el a szennyeződést egy tisztítókendővel, majd egy száraz ruhával törölje szárazra. A készülékházat a tisztításhoz ne merítse vízbe. A tisztítás után szárítsa meg a készüléket.

Víztartály sapka: A szennyeződések egy nedves ruha segítségével távolítsa el, majd törölje szárazra azt.

Szórófej: Folyó vízben öblítse le, majd törölje szárazra azt. Cserélje ki a fűvókát 6 havonta.

Vízszívó cső: Folyó vízben öblítse le, majd törölje szárazra azt. Ne hajlítsa meg, húzza vagy csavarja a csövet.

Tartály: Folyó vízben öblítse le, majd törölje szárazra azt.

Hosszabb idejű tárolás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék minden eleme tiszta és száraz.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem működik	Most vásárolta meg a terméket, vagy több mint 3 hónapja nem használta.	Csatlakoztassa az eszközt a töltőre és töltse 4 órán át.
A bekapcsolást követően pár percig működik	Az akkumulátorok élettartamuk végéhez értek.	Vegye fel a forgalmazóval a kapcsolatot.
	A töltési idő nem volt elegendő.	Csatlakoztassa az eszközt a töltőre és töltse 4 órán át.
Nagyon alacsony a víznyomás.	A fűvókában szennyeződés ragadt.	Cserélje ki a fűvókát.
	A fűvóka megrongálódott.	
	A szűrőben szennyeződés ragadt.	Tisztítsa meg a szűrőt.
Nem távozik víz a készülékből	A víztartály üres.	Töltse fel vízzel a tartályt.
	A készülék túlságosan meg van döntve használat közben.	Függőleges állapotban használja a készüléket.

Újrahasznosítás

A készülékben található újratölthető akkumulátor könnyen eltávolítható újrahasznosítás céljából.

A termék élettartamának lejártakor vegye ki az újratölthető akkumulátort a fogantyúból az alábbi utasításokat követve. Az alábbi művelet során ügyeljen arra, hogy védje szemét, kezét, ujjait és azt a felületet, amelyen dolgozik.

Távolítson el 2 darab gumilábat a fogantyú aljáról.

Illesszen egy csavarhúzó a fogantyú alján található nyílásba, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az alsó kupak kioldásához.

Csúsztassa le a víztartályt a készülékről, és csavarja ki a szívócső melletti két csavart.

Nyissa ki a felső fedelet, helyezze a belső részt az egységen kívülre, majd csavarja ki a belső rész összes csavarját.

Vágja le az akkumulátor vezetékét, és húzza ki az elemeket a belső részből.

Ha újrahasznosítással kapcsolatos kérdései vannak, forduljon a helyi hulladékgazdálkodási irodához.

Garancia

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális javítás igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló igazolást (vásárlási számla).

A következő feltételeket nem tartalmazza a garancia:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a Fairywill által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.



Kedves Vásárlónk!
Kérjük értékelje termékünket!
e-hall.hu
Piacvezető termékek kedvező
áron!