

Használati utasítás

Fairywill 2001 szónikus fogkefe

Köszönjük, hogy az 2001-es modellünket választotta.

Kedves Szülő!

Kérjük, hogy mielőtt bemutatná gyermekének a készülék használatát, figyelmesen, teljes terjedelmében olvassa el az erről szóló használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

Jellemzők

Szónikus vibráció, 38 000 mikrorezgés percenként, dinamikus tisztítás

3 fogmosási funkció: érzékeny üzemmód, mélytisztító üzemmód, masszázs üzemmód

Egyedi kialakítású sörték, amelyek pontosan követik az egyes fogak felületét az íny és a nehezen elérhető területek alapos tisztításához

Víz behatolása elleni védelem mértéke: IPx7

Hosszú élettartamú akkumulátor, egyszeri töltés akár 21 napos üzemidőt biztosít

USB töltés, egyszerű és kényelmes otthoni vagy utazás közbeni használatra

2 perces intelligens időzítő 30 másodpercenkénti rezgésszünettel

A fogorvosok ajánlása szerint a fogmosást 2 percen át kell végezni, amelyben a szájüreg minden környedére 30 másodperc jut.

Ha érzi a szünetet, lépjen a következő részre, és a fogkefe 2 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Cserélhető fogkefefejek

Figyelmeztetés

Az első használat alkalmával zsibbadás érzése léphet fel, amely természetes. A további használatot követően csillapodni fog.

Szakember segítsége nélkül ne végezzen javítást a készüléken.

Ne használja tovább a fogkefefejet, ha a sörték töröttek vagy hajlottak. Háromhavonta cserélje a fogkefefejet, amennyiben a kopás jelei mutatkoznak, hamarabb cserélje. Csak a gyártó által ajánlott fogkefefejjel használja a készüléket.

Tartsa a töltőt víztől távol. Ne helyezze vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelébe vagy fölé. Ne merítse a töltőt vízbe vagy más folyadékba.

Tisztítás után, hálózatra való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a töltő teljesen megszáradt-e.

A hálózati kábel nem cserélhető. Sérülése esetén a töltő nem használható. A kockázatok elkerülése érdekében a töltőt mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.

Ne használja a töltőegységet szabadtéren vagy felmelegedett felületek közelében.

Ne használja tovább, ha a készülék bármilyen módon károsodott (fogkefefeje, fogkefenyél, töltő).

Ne tisztítsa a fogkefefejet, a fogkefe markolatot vagy a töltőegységet mosogatógépben.

Ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészeti műtétje volt, előbb kérje ki fogorvosa tanácsát, mielőtt a készüléket használná.

Forduljon fogorvosához, ha a fogkefehasználat során túlzott vérzés jelentkezik

A terméket kizárólag a fogak, a fogíny és a nyelv tisztítására tervezték, más célra nem használható.

Annak érdekében, hogy gyermeke a készüléket magabiztosan tudja használni, javasoljuk, hogy eleinte a szülők felügyeljék gyermekük fogmosását!

Ne harapdálja vagy rágja a fogkefét! Gyermekek játék céljára illetve szülői felügyelet nélkül ne használják a fogkefét!

Ne tegye ki a fogkefét magas hőnek vagy közvetlen napfénynek.

Specifikációk

Működési hőmérséklet: 0-50C

Üzemi feszültség: DC1.2V

Sörte anyaga: műanyag


Bemeneti feszültség: DC5.0V

Bemeneti teljesítmény: 0.6 W

Teljesítmény: 0.55 W

Töltési idő: kb. 6 óra

Kialakítás

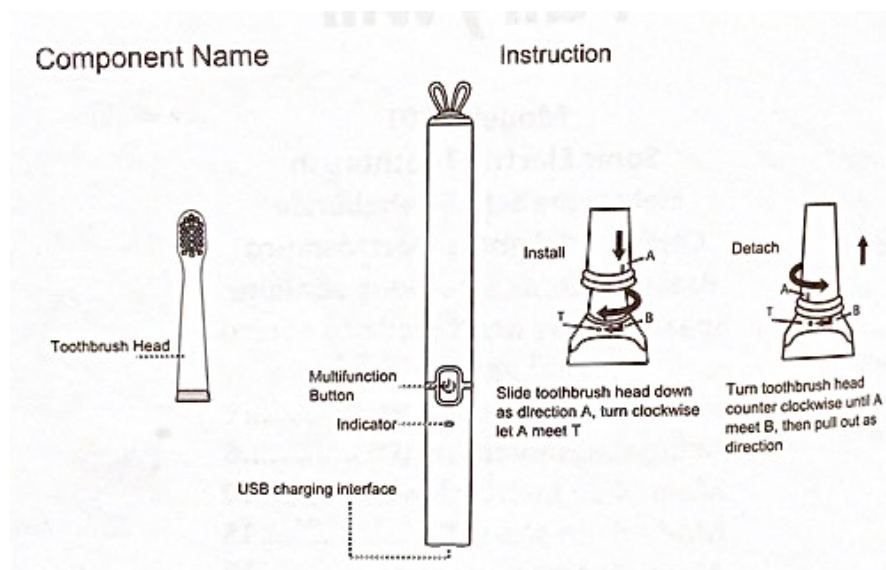

Használat

Csatlakoztassa a fogkefét USB-kábellel bármely áramforráshoz.

Nyomja a fogkefefejet a markolatra úgy, hogy a sörték a markolat elülső fele felé mutassanak és győződjön meg róla, hogy az tökéletesen illeszkedik.

Nedvesítse meg a sörtéket és tegyen kis mennyiségű fogkrémet a sörtékre.

Hogy elkerülje a fogkrém fröccsenését, csak azután kapcsolja be a fogkefét.

Helyezze a fogkefe sörtéit a fogához úgy, hogy az kissé a fogíny széle felé dőljön.

A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. Óvatosan tartsa a sörtéket a fogakon és a fogíny peremén. Mosson fogat a fogkefefej finom előre-hátra mozgásával, hogy a sörték a fogak közé is bejussanak. ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogakra, és ne alkalmazza a sörtéket egy adott területen hosszú ideig.

Válassza ki az Önnek tetsző fogmosási funkciót a „Power” gomb megnyomásával. 3 fogmosási funkció közül választhat: mélytisztító üzemmód, érzékeny üzemmód, masszázs üzemmód.

Érzékeny üzemmód: a fogak, a nyelv és az érzékeny területek gyengéd tisztításához (zöld fény)

Mélytisztító üzemmód: A fogak hatékony tisztításához (piros fény)

Masszázs üzemmód: Gyengéd stimulációhoz, amelynek célja, hogy a fogíny feszes és egészséges maradjon.

A funkciók közötti váltáshoz ismételten nyomja meg a „power” gombot.

A fogorvosok ajánlása szerint a fogmosást 2 percen át kell végezni, amelyben a szájüreg minden körnegyedére 30 másodperc jut.

Ha érzi a szünetet, lépjen a következő részre, és a fogkefe 2 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Töltés

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a töltésjelző lámpa 10-szer felvillan, emlékeztetve a töltésre.

Csatlakoztassa a fogkefét USB-kábellel bármely áramforráshoz, hogy a töltésjelző lámpa világítson.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény automatikusan kialszik, és a töltőegység automatikusan kikapcsol a túltöltés elkerülése érdekében.

Az első használat alkalmával vagy ha hosszabb ideig nem használja, normális, hogy a jelzőfény a kezdeti 5 percre nem világít.

Garancia

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális javítás igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló igazolást (vásárlási számla).

A következő feltételeket nem tartalmazza a garancia:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a Fairywill által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.



Kedves Vásárlónk!
Kérjük értékelje termékünket!
e-hall.hu
Piacvezető termékek kedvező
áron!